

PHILIPS

AVENT

Protector para
pezones

Accesorios lactancia

Mayor contacto con la piel

Protegen de irritaciones

Mediano (21 mm)

2 uds.



SCF153/03



Le ayuda a prolongar la lactancia de una forma
cómoda*

Enganche fácil y suave con la piel del bebé

Las protecciones de pezones están diseñadas para ayudarle a dar el pecho cuando padece molestias en los pezones o problemas con el enganche. La forma de mariposa ultracompacta permite que el bebé tenga contacto con el pecho y le ayuda a mantener el vínculo.

Estuche higiénico

- Limpieza fácil en la funda de transporte higiénica

Enganche fácil del bebé*

- Diseñado para ayudar con los problemas para engancharse

Características del producto


- Diseñados para adaptarse
- Diseñado para que el bebé tenga un mayor contacto con la piel

Cuándo se debe usar un protector para pezones

- Combinar la lactancia materna con el biberón
- Los bebés pueden beber a su propio ritmo
- Diseñados para pezones sensibles, irritados o doloridos


Destacados

Exclusiva forma de mariposa

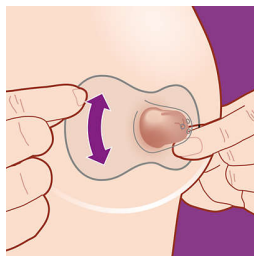


La forma de mariposa ultrafina de nuestros protectores de pezones se ha diseñado para que el bebé tenga un contacto piel con piel. Gracias a esta forma, no solo la nariz está en contacto con el pecho, sino también la barbilla, para que el bebé pueda oler el aroma de la madre y tocar su piel. Solo tiene que colocar el protector sobre el centro del pezón para asegurarse de que el bebé enganche correctamente toda la areola. Fomente el vínculo con su pequeño a la vez que protege sus pezones.

Diseño para favorecer el enganche*

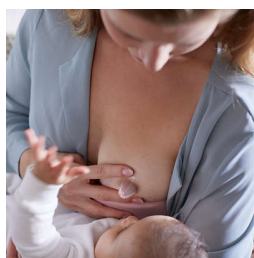

Hemos diseñado nuestros protectores de pezones para ayudar con los problemas para engancharse iniciales y para prolongar la lactancia*. Para las madres con pezones planos e invertidos y los bebés con una técnica de succión débil o anomalías orales, el protector de pezones tiene la forma de un pezón para favorecer el enganche, que mantiene su posición protuberante durante las pausas de la toma del bebé.

Protegen los pezones durante la toma

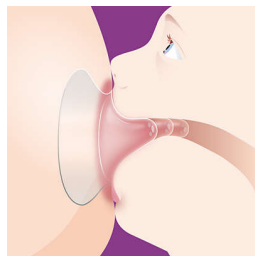

Los protectores de pezones se han diseñado para ofrecer comodidad y hacer que las tomas sean más agradables si tiene los pezones irritados, agrietados o doloridos. Pueden ayudar a reducir el roce y el estiramiento de los pezones durante la lactancia, para que pueda proporcionar la mejor leche a su bebé de forma cómoda.

Alimentación al ritmo del bebé




Si es necesario controlar el flujo de leche de la madre o el bebé no tiene la fuerza suficiente, los protectores de pezones son también una gran ayuda. Los tres orificios de la punta del protector pueden ayudar a regular el nivel de flujo de leche materna para el bebé en caso de que haya un exceso de suministro de leche. De esta forma, el bebé puede beber a su propio ritmo en caso de que la madre experimente una bajada de leche demasiado activa.

Combina la lactancia materna y el biberón

El material de silicona ultrafino y suave del protector de pezones Philips Avent prácticamente forma parte de nuestras soluciones de alimentación para lactantes ya que les ayuda a realizar una transición perfecta entre el pecho y la alimentación con biberón al combinar ambos.

Dos tamaños adecuados a sus necesidades

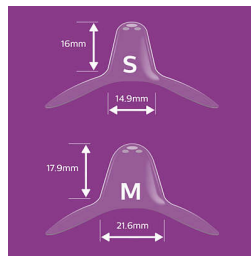

Los protectores de pezones están disponibles en dos tamaños para adaptarse mejor a su pecho. Los protectores pequeños son adecuados para pezones a partir de 12 mm de diámetro y los medianos para pezones de hasta 21 mm. Para encontrar su tamaño, póngase cómoda y coloque uno de los aros perforados sobre el pezón. Gire el protector hacia la derecha e introduzca el pezón en el conducto. A continuación, estire la base del protector alrededor de la areola. Si hay un espacio de 2 mm entre el pezón y la silicona, el tamaño es el correcto. Los tamaños se basan en la mamila y no en la areola. ¿No está segura? Pida ayuda a un profesional de la salud.

Limpieza fácil en cualquier momento



Debe limpiar los protectores de pezones antes de cada uso. Para ello tardará menos de 10 minutos. Colóquelos en agua hirviendo durante cinco minutos o utilice la funda higiénica. Coloque los protectores de pezones bien enjuagados en la funda y añada 25 ml de agua. A continuación, coloque los protectores de pezones en un microondas con una potencia de entre 750 y 1000 W durante tres minutos. Deje que se enfrien durante cinco minutos. A continuación, escurra el agua y estarán listos para su uso. Utilice la cómoda funda de transporte higiénica en cualquier parte, así como para guardar los protectores de pezones y mantenerlos limpios.

Especificaciones

Material

Protector para pezones: Sin BPA*, silicona

Qué incluye

Protectores de pezones de 21 mm: 2 pcs

Funda de transporte higiénica: 1 pcs

Diseño

Diseño con forma de mariposa

Consumer Trade Item

Height: 12.4

Width: 7.8

Length: 4.8

Net Weight: 0.023

Gross Weight: 0.027

GTIN: 08710103907763

Country of origin: IT

Harmonized system code: 39269097

Caja exterior

Height: 13.9

Width: 8.8

Length: 18.8

Net Weight: 0.138

Gross Weight: 0.202

GTIN: 18710103907760

